


# RENCO Soft



**Komfortable  
Weichlagerung  
mit den Vorteilen  
des Wechseldrucks**

- Regelmäßige deutliche Druckentlastung zur Dekubitusprophylaxe bei Patienten mit mittlerem bis hohem Risiko
- Unterstützung der Therapie von Druckgeschwüren bis Grad III
- Hoher Komfort auch für Patienten mit veränderter sensorischer Wahrnehmungsfähigkeit und Schmerzpatienten
- Bi-elastischer, atmungsaktiver Bezug aus Polyurethan

## Matratze und Bezug

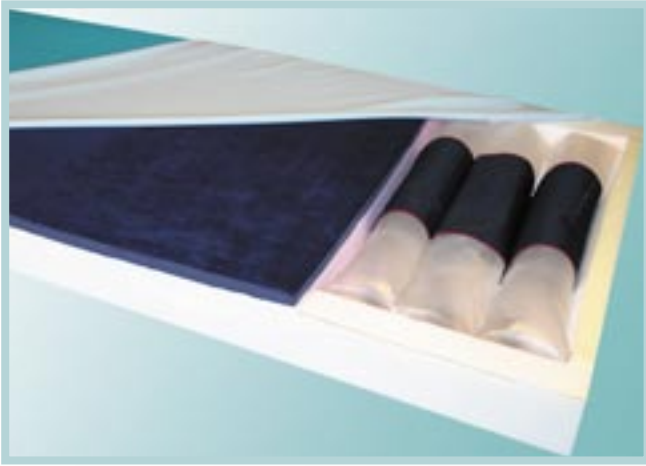

- Die viskoelastische Schaumstoffabdeckung der Luftkammern nimmt den Körper sanft auf und vergrößert die Auflagefläche im Rumpfbereich, während der Beinbereich auf die besondere Entlastung der Fersen ausgelegt ist.
- Durch die alternierende Befüllung der 11 cm tiefen Luftkammern wird eine regelmäßig wiederkehrende deutliche Druckentlastung erreicht.
- Der bi-elastische Bezug aus Polyurethan ist desinfizierbar und kann bei Temperaturen bis zu 95°C gewaschen werden.
- Das atmungsaktive, wasserdichte Material bietet kaum Reibungswiderstand und sorgt durch die hautsympathische Oberfläche für hohen Liegekomfort.
- Die einzigartige Kombination von Weichlagerung durch hochwertigen Schaumstoff und Wechseldruck verbindet wirksame Dekubitusprophylaxe mit hohem Patientenkomfort.
- In die Schaumstoffwanne der Matratze sind insgesamt 12 Luftkammern eingebettet.
- Alle Luftkammern sind einzeln austauschbar.
- Fersenzellen sind entleerbar oder statisch zu stellen.
- Einsetzbar bis zu einem Patientengewicht von 140 kg.



## Aggregat

- Aggregat leise, vibrationsarm, einfach zu bedienen
- Druckeinstellung auf Patientengewicht (mit dem Drehregler)
- Wechseldruck- und Statikfunktion
- LED Anzeige zur Drucküberwachung und optischer Niederdruckalarm



## TECHNISCHE DATEN

### Matratze

Abmessungen: 192 x 84 x 17 cm (L x B x H)  
Gewicht: 17 kg  
Anzahl der Luftkammern: 12



### Aggregat

Abmessungen: 28,5 x 27,5 x 13 cm (B x H x T)  
Gewicht: 2,4 kg  
Netzanschluss: 230 Volt / 50 Hz  
Stromaufnahme: 10 - 15 Watt  
Zyklusdauer: 12 Minuten

Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

**GerroMed** Pflege- und Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Fangdieckstraße 75b · 22547 Hamburg · Tel. 040 - 54 73 03-0 · Fax 040 - 54 73 03-33 · E-Mail mail@gerromed.de  
[www.gerromed.de](http://www.gerromed.de)

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO13485

